Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung: Pedilay® hand

Pedilay® hand ist ein elastischer, gebrauchsfertiger 2-Phasen-Fixierverband für die Hand bis zum angrenzenden Unterarmbereich. Das Produkt ist für die Anwendung auf intakter Haut vorgesehen. Er besteht aus einem Fertigverband für die Hand und einem Kompressionsband.

Die beiden Elemente bestehen aus einem zweilagigen Vlies mit eingearbeiteten elastischen Fäden. Das Klettverschlusssystem ist repositionierbar. Pedilay® hand kann an der rechten oder linken Hand verwendet werden.

Verwendungszweck

Pedilay® hand dient zur Fixierung und leichten, adaptierbaren Kompression nach chirurgischen Eingriffen im Hand- Handgelenkbereich und angrenzenden Unterarmbereichs.

In der Akutphase ermöglicht der Handverband in Verbindung mit dem Kompressionsband eine zuverlässige Stabilisierung, wodurch Schwellungen reduziert werden können. Durch das Klettverschlusssystem ist eine Repositionierung jederzeit möglich, sodass eine gezielte und kontrollierte Kompression des betroffenen Bereichs erreicht werden kann.

In der Nachversorgungsphase, wenn keine Kompression mehr notwendig ist, dient der gebrauchsfertige Handverband ohne zusätzliches Kompressionsband dem sicheren Halt des Primärverbandes und der Verwendung als Schutzverband über Wundauflagen oder Pflastern.


Gebrauchsanweisung

Anwendungsmethode (empfohlen) oder nach Anweisung eines Arztes.

ANWENDUNGSSCHRITTE


1. Öffnen Sie alle Klettverschlüsse des Handverbandes. Führen Sie den Handverband über die Finger bis zum Daumenansatz, um eine korrekte Positionierung zu gewährleisten.

①

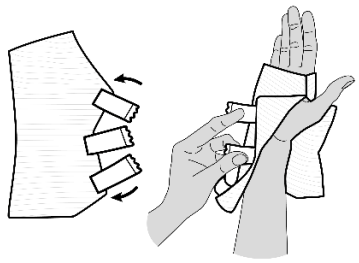


2. Ziehen Sie den Handverband in Richtung des Handgelenks und positionieren Sie ihn über die gesamte Hand. Die Finger sollen unbedeckt und frei beweglich sein. Positionieren Sie den Handverband so, dass er die Handfläche bis zum angrenzenden Unterarmbereich sicher bedeckt

②

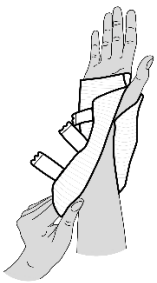


3. Schließen Sie im Anschluss alle Klettverschlüsse und achten Sie dabei auf ein möglichst faltenfreies Anlegen.

③

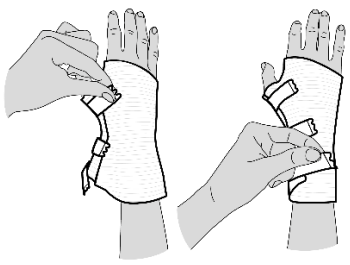


4. Öffnen Sie die Klettverschlüsse des Kompressionsbandes. Fixieren Sie einen der Klettverschlüsse an der gewünschten Position neben dem behandelten Bereich auf dem Handverband.

④

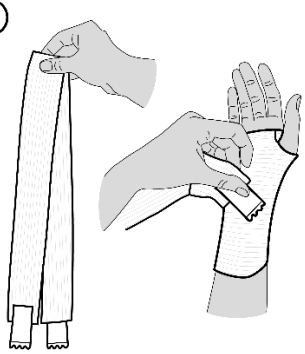


5. Legen Sie das Kompressionsband mit gleichmäßiger Spannung über den behandelten Bereich an. Achten Sie auf faltenfreie Anlage sowie gleichmäßige Druckverteilung.

⑤

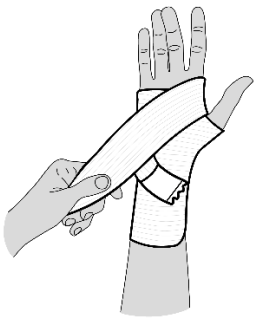

6. Bei Bedarf können Sie das Band repositionieren, um den Kompressionsdruck individuell anzupassen. Sichern Sie die Fixierung mit dem Klettverschlusssystem.

⑥

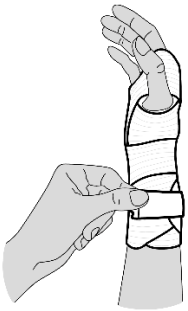

7. Achten Sie darauf, das Kompressionsband weder zu locker noch zu straff anzulegen.

⑦



Zusätzliche Informationen

Es wird empfohlen, Pedilay® hand im Sitzen oder Liegen anzulegen. Wählen Sie die passende Größe gemäß der nachfolgenden Tabelle aus.

Größe	Größennummer (EU)	Handumfang
S	7	16,5 cm - 19 cm
M	8	19 cm – 21,5 cm
L	9	21,5 cm – 24 cm

Die folgenden Faktoren können eine andere Größe von Pedilay® hand erforderlich machen:

- Skelettdeformitäten
- Extrem voluminöse Hände
- Geschwollene Hände
- Amputationen
- Zusätzliche primäre / sekundäre Wundauflagen

Gebrauchsanweisung

Hinweis:

- Legen Sie das Kompressionsband nicht zu straff an, um eine Überkompression und Einschnürungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Pedilay® hand-Verband nicht zu locker sitzt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kribbeln, Taubheitsgefühl, Verfärbungen oder Schmerzen auftreten – entfernen Sie den Verband sofort, wenn Sie eines dieser Symptome feststellen.
- Das Kompressionsband ist nur in Verbindung mit dem Pedilay® hand-Verband zu benutzen.
- Pedilay® hand ist korrekt angelegt, wenn sich keine Hohlräume bilden, keine Lücken oder Falten vorhanden sind und das Material keine Einschnürungen verursacht.
- Verwenden Sie Pedilay® hand nur gemäß der Gebrauchsanweisung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen.
- Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung oder bei Verschlechterung des Gesundheitszustands ist die Anwendung sofort abzubrechen und ärztlicher Rat einzuholen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produktes Grund zu der Annahme haben, dass ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und Ihrer nationalen Behörde.

Hygiene und Entsorgung

Wechseln Sie Pedilay® hand:

- täglich bei akuten, infektiösen Wunden
- bei Verschmutzungen
- wenn das Material überdehnt oder gerissen ist
- bei jedem Wechsel der darunter befindlichen Primärschicht (Wundauflage)

Die Wiederverwendung eines Medizinproduktes zum Einmalgebrauch ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um diese wiederzuverwenden, kann deren Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigen.

Pedilay® hand kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Gebrauchsanweisung



KOB GmbH
Lauterstraße 50, 67752 Wolfstein, Germany
www.kob.de

Revisionsdatum: 05/2026